


ENDO ACCESS[®]


Guide Wire

バイオラックス親水性ガイドワイヤーLZ

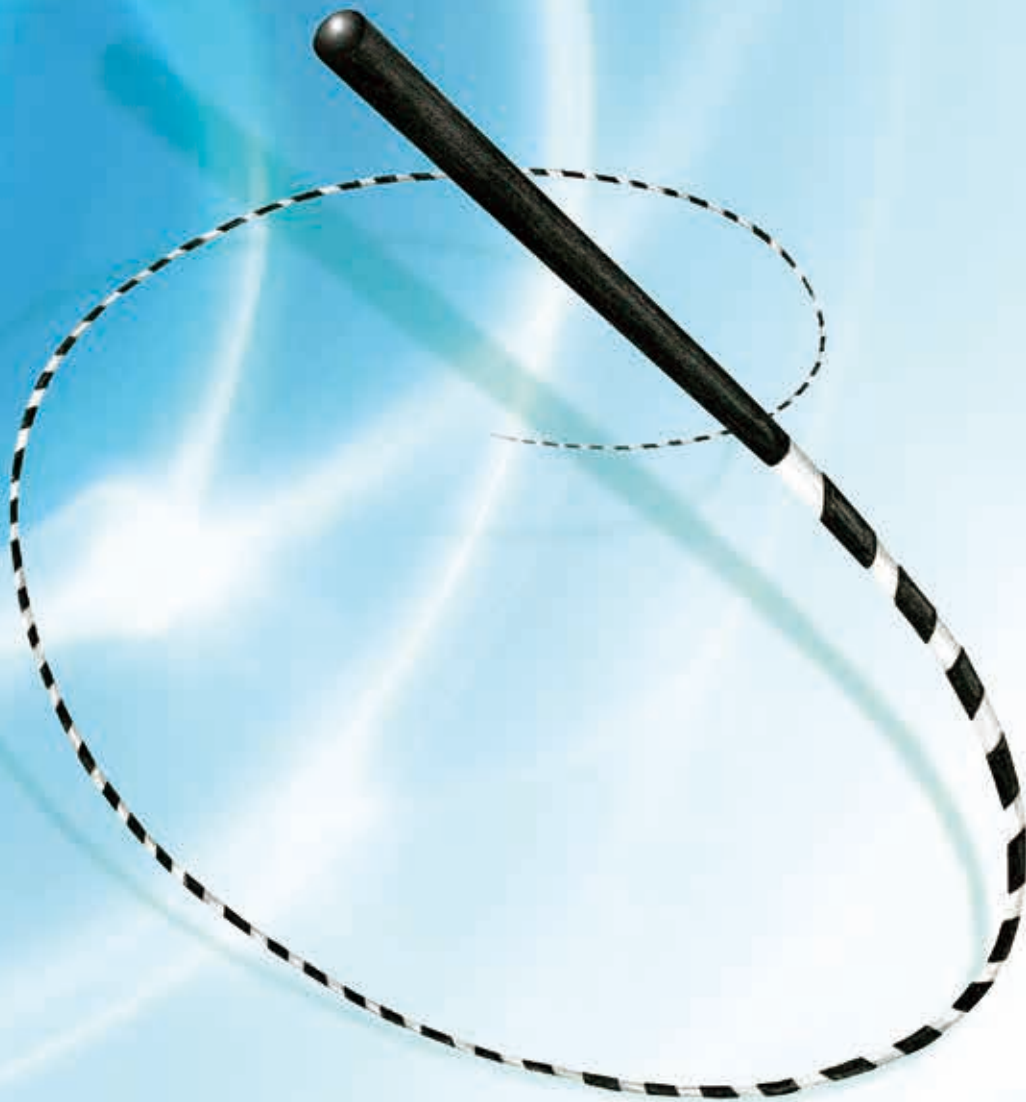


株式会社 メディコン

エンドアクセス®に進化の波

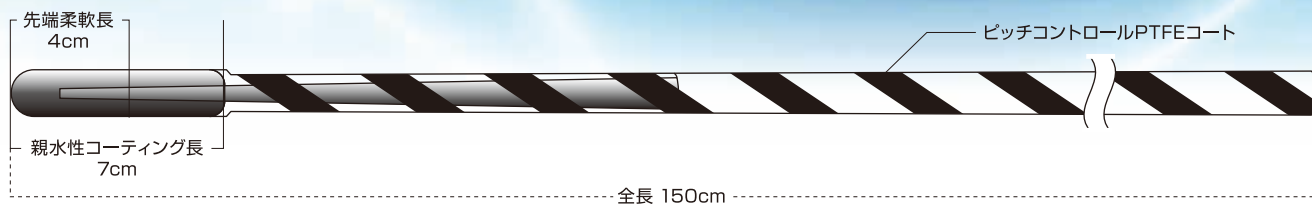


表面滑り性

ガイドワイヤのシャフト部にストライプのピッチコントロールPTFEコートを施すことにより、表面抵抗が大幅に軽減されました。

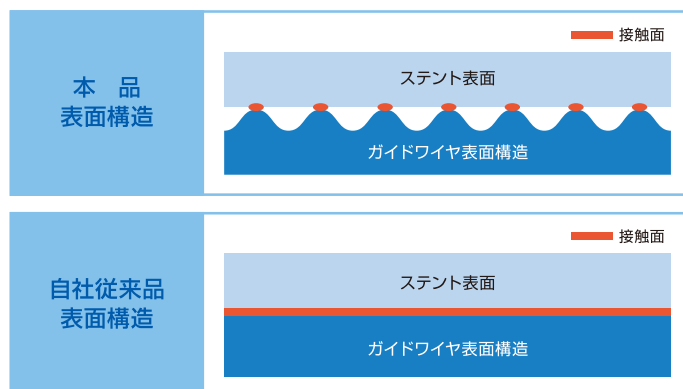

※自社従来品と比較して、ステント表面に対しての接触面積を少なくすることにより、表面抵抗を軽減しております。

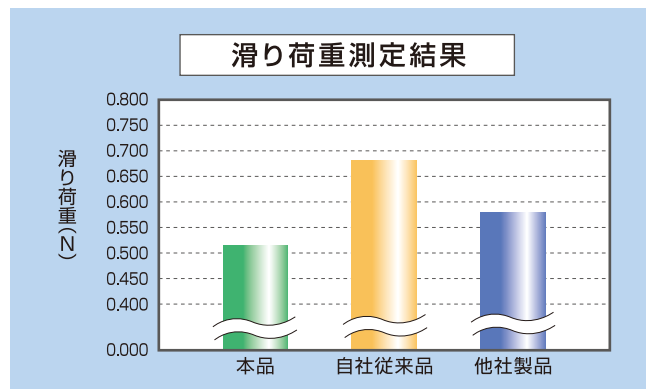

ガイドワイヤ操作視認性



本品シャフト部のストライプにより、ガイドワイヤ操作の際、術者の手元部、内視鏡視野でのガイドワイヤの動きが確認しやすくなっております。

親水性コーティングを施した柔軟な先端部

- 先端部4cmは柔軟な構造となっており、粘膜等の損傷を最小限に抑えます。
- 先端部7cmに親水性コーティングが施されており、尿管の屈曲部や狭窄部へのアクセスが容易になります。

高い操作性を実現するシャフト部

- シャフト部のコアにはナイチノールを使用しており、キンクしにくく、トルク伝達性に優れています。
- コシのあるシャフト部は、ガイドワイヤ通過後の尿管の屈曲を解消し、その後の操作を行いやすくします。
- シャフト部の凹凸加工は、術者のガイドワイヤ操作を行いやすくします。

ORDERING INFORMATION

販売名:パイオラックス親水性ガイドワイヤー-LZ (エンドアクセス)

カタログ番号	コネクタ色	外 径	先端形状	先端柔軟長	全 長	包装単位
EALS-3515Z	紫	0.035" (0.89mm)	ストレート	4cm	150cm	5入
EALA-3515Z			アングル			

※エンドアクセスは、株式会社メディコンの登録商標です。

※製品の仕様・形状等は、改良等の理由により予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※事前に必ず添付文書を読み使用上の注意等を守って正しくご使用ください。

承認番号:21600BZZ00536000

クラス分類:[2]管理医療機器

一般的名称:非血管用ガイドワイヤ

製造販売元

PIOLAX

株式会社 パイオラックス メディカル デバイス
神奈川県横浜市保土ヶ谷区狩場町179

製造販売元

株式会社 メディコン

本 社 大阪市中央区平野町2丁目5-8 (平野町センチュリービル9F) ☎06 (6203) 6541 (代)
大阪営業所 大阪市中央区平野町2丁目5-8 (平野町センチュリービル4F) ☎06 (6203) 6770 (代)
東京営業所 東京都台東区上野5丁目6-10 (台和上野ビル8F) ☎03 (5812) 3511 (代)
札幌 ☎011 (281) 7422 仙台 ☎022 (295) 6762
名古屋 ☎052 (722) 4373 広島 ☎082 (924) 7277
福岡 ☎092 (526) 6677

■代理店